



多用途
微生物檢體
運送保存

eSwab

適用培養與分子檢驗
液化傳送拭子

採集 • 折入 • 釋出




檢體迅速釋出於1 ml Amies 溶液
可用於多重分析
可用於細菌、病毒和披衣菌的核酸與
抗原
維持需氧，厭氧與挑剔菌的生存能力
不含 DNase 與 RNase



包裝內含
1 ml Amies 溶液
+ 1支絨毛拭子



適用於細菌培養與保存微生物的DNA，RNA和抗原的通用採檢品。
具有獨特的紅色斷點設計，並帶有彩色標示的卡榫瓶蓋。

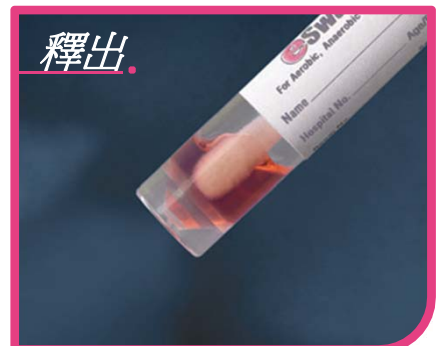

亞醫醫學股份有限公司
PAN ASIA BIOMEDICAL TECHNOLOGY INC.
(02) 2741 - 8169
www.pan-asia-bio.com.tw





eSwab


適用培養與分子檢驗 液化傳送拭子

型號	產品規格	包裝	顏色	適用部位	管帽卡榫
490CE.A	1 支regular size採檢刷 1 ml液態Amies medium	50組/包 10包/箱	粉色	鼻、喉嚨、陰道、 直腸、傷口、糞 便等	YES
481CE	1 支minitip採檢刷 1 ml液態Amies medium	50組/包 10包/箱	橘色	眼、耳朵、喉嚨、 鼻腔、子宮頸	NO
482CE	1 支鼻咽採檢刷 1 ml液態Amies medium	50組/包 10包/箱	藍色	鼻咽、小兒採檢	NO
483CE	1 支鼻咽採檢刷 1 ml液態Amies medium	50組/包 10包/箱	橘色	泌尿生殖道	NO
484CE	1 支小兒採檢刷 1 ml液態Amies medium	50組/包 10包/箱	藍色	兒科檢體採集	NO

使用說明



特殊管帽設計，可直接使用採檢刷

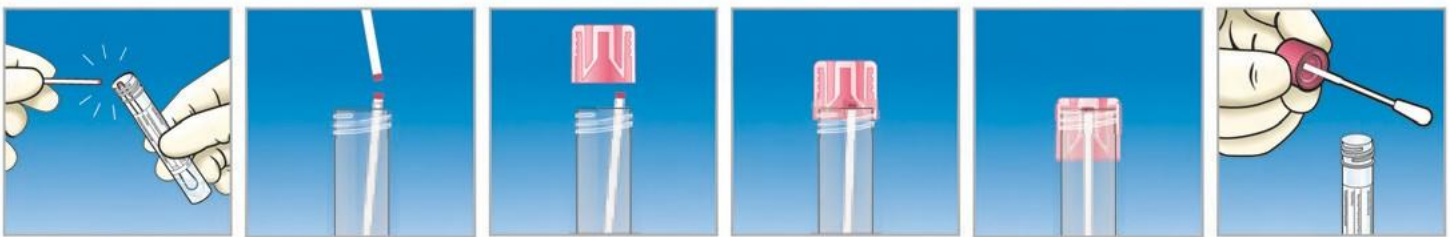

重要提示：由於481CE、482CE、483CE、484CE採檢棒材質具彈性，此功能對於具彈性的採檢棒不適用，此類型產品則利用無菌鑷子將採檢棒從管中取出

K65 01.09

採檢拭子特殊斷點
沿著拭子軸紅色斷點處折斷
拭子留ESwab運送保存管中



Copan Italia S.p.a. Via F. Perotti, 10, Brescia, 25125, Italy
Tel: +39 030 268 7211 • Fax: +39 030 268 7250
E-mail: info@copanitalia.com Check out our website: www.copaninnovation.com

Copan Flocked Swabs:
Worldwide Patent No.
WC2004/086979

CE 0344